



INVISIA

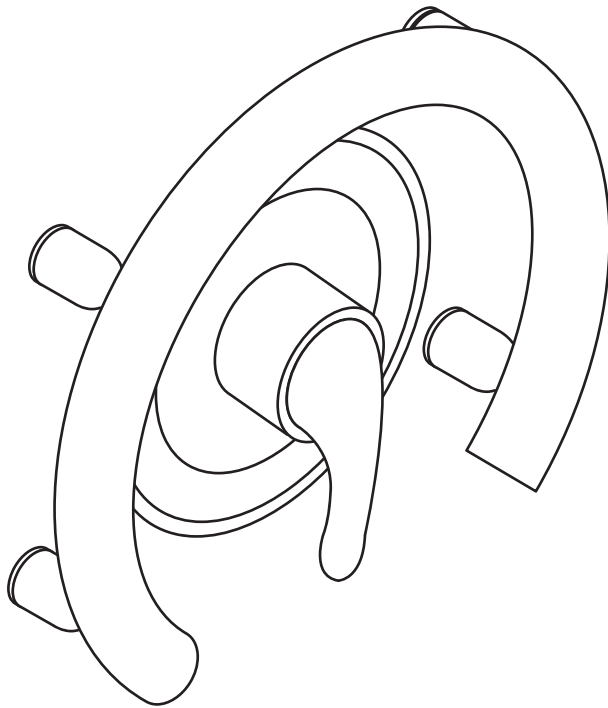


Accent Ring


INV-ACR
(DC151 - RevE)

invisiacollection.com

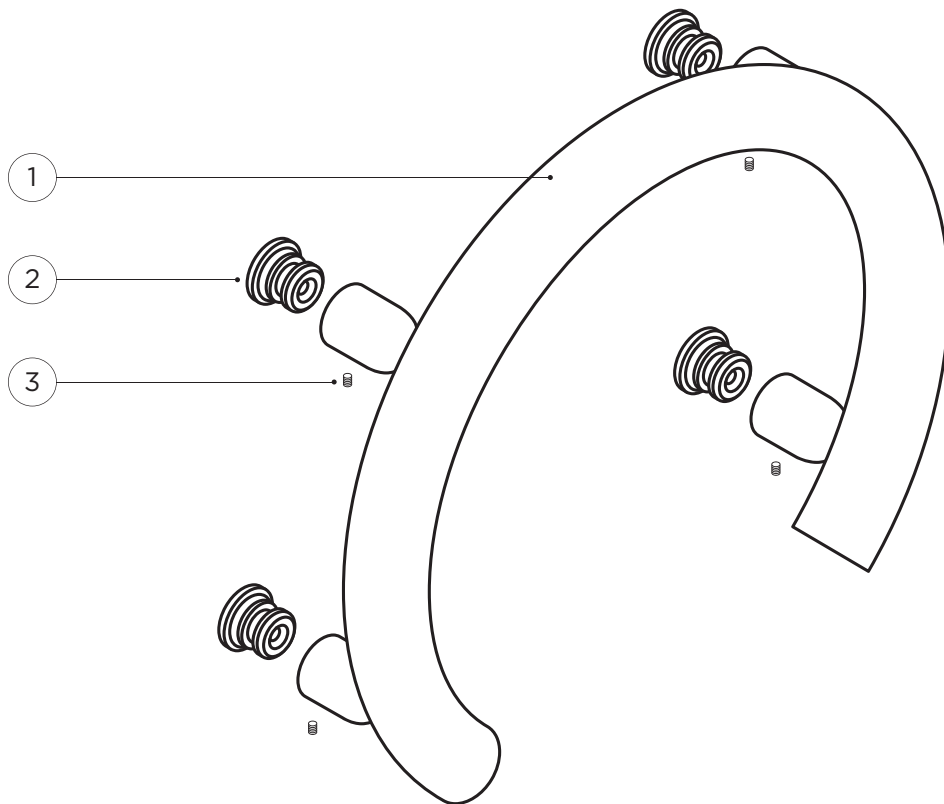

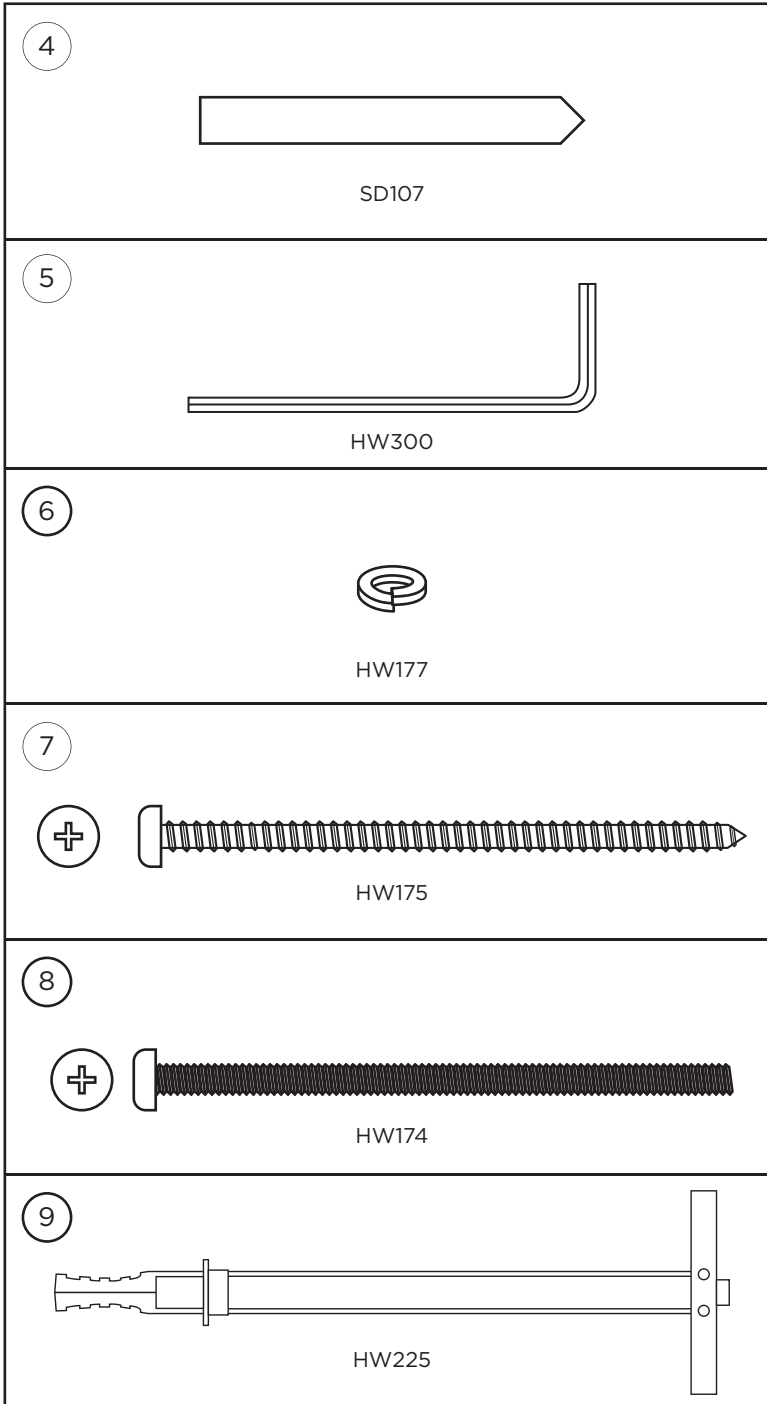


1

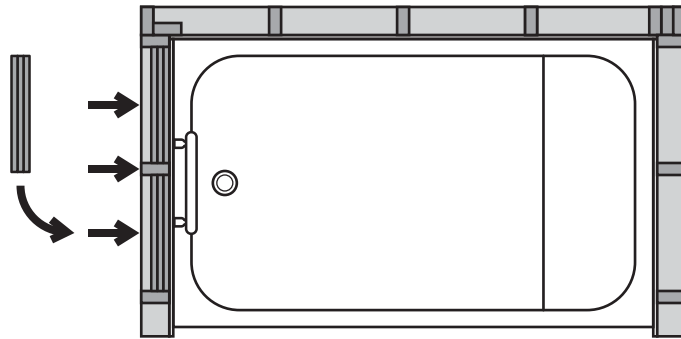

2



MAX
500lbs / 227kg

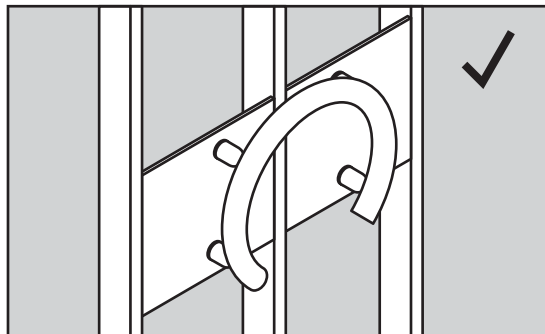


6 x4

7 x4



MAX
350lbs / 159kg

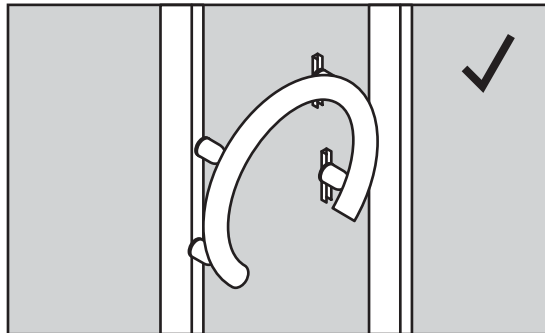

6 x4

7 x2


6 x1

8 x2

9 x2



MAX
200lbs / 91kg



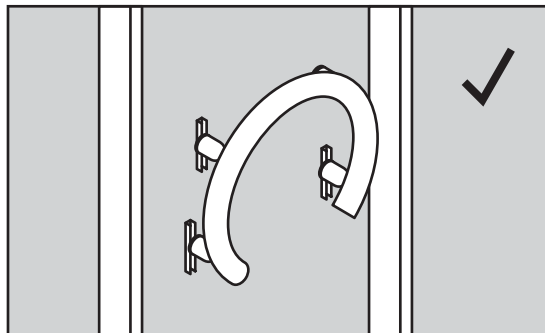


6 x4


8 x4

9 x4


B

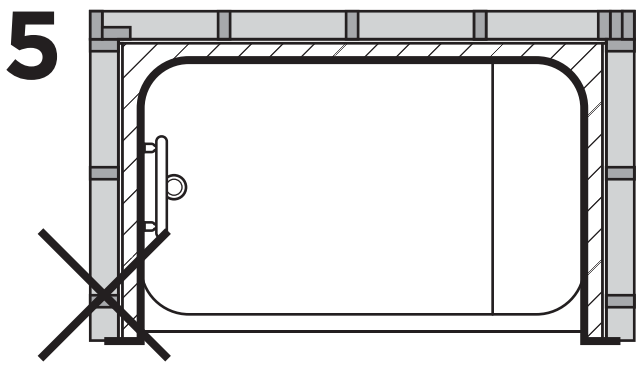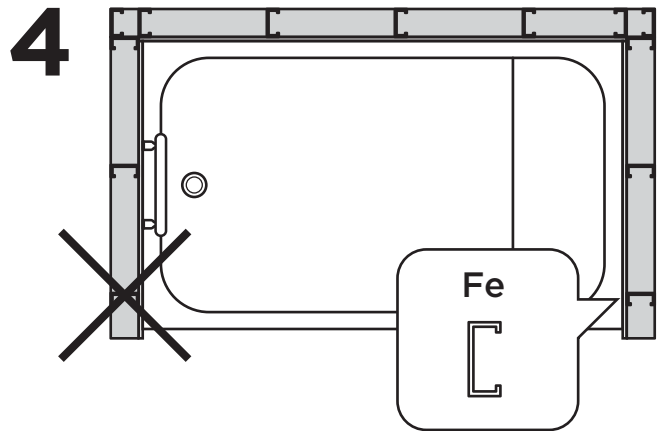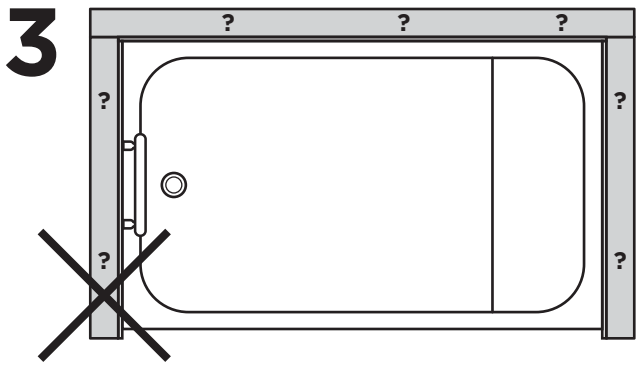


C

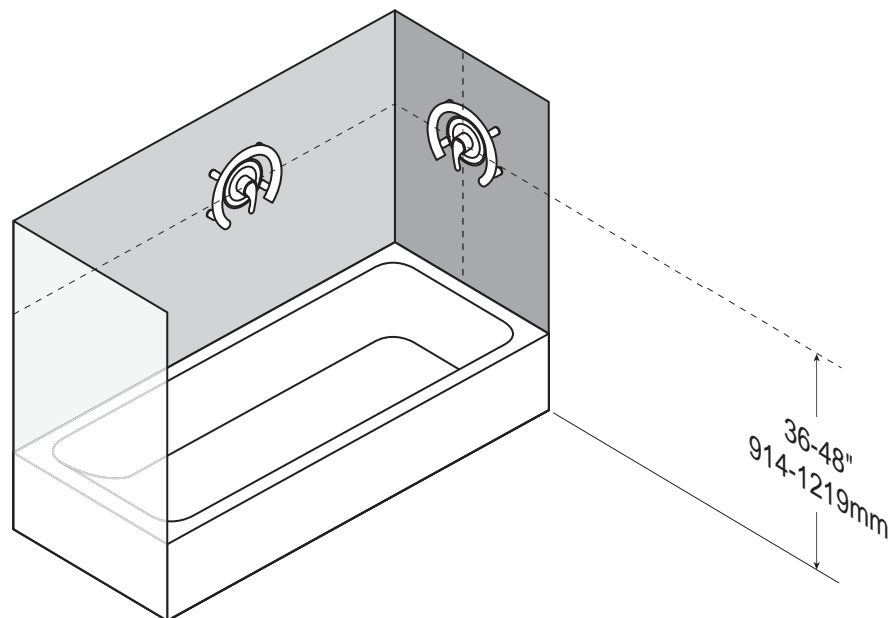


1

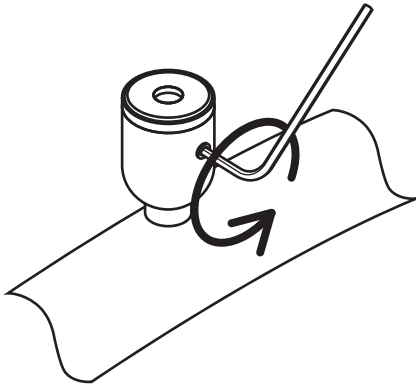


2

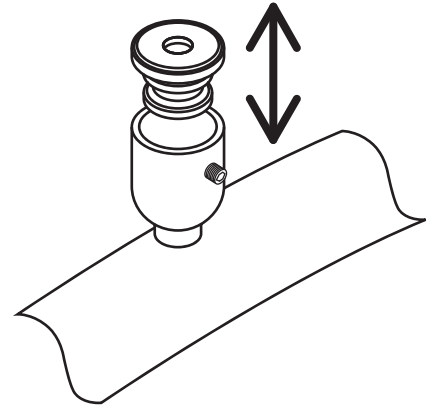


3

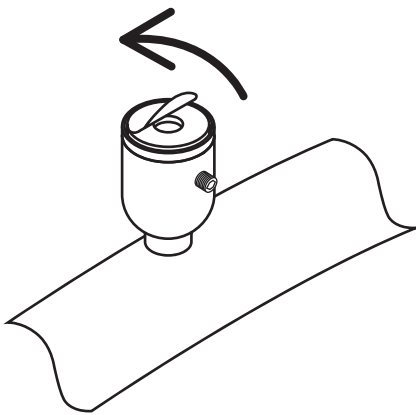


4

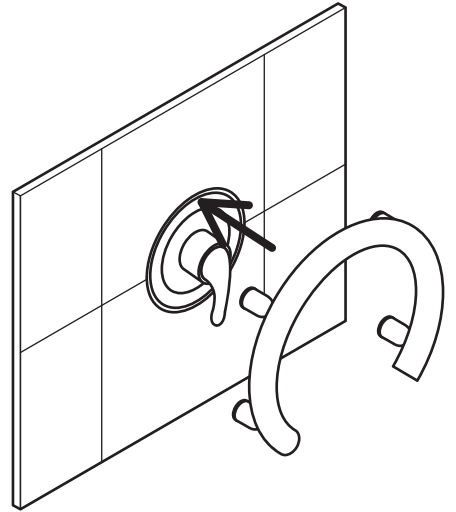


5

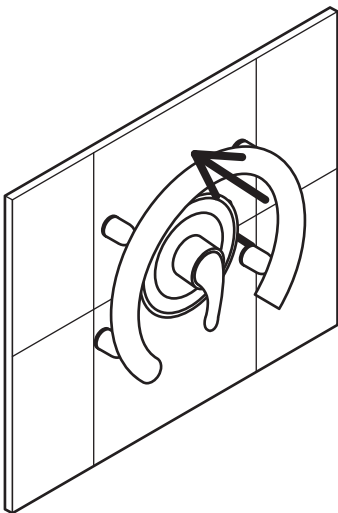


6

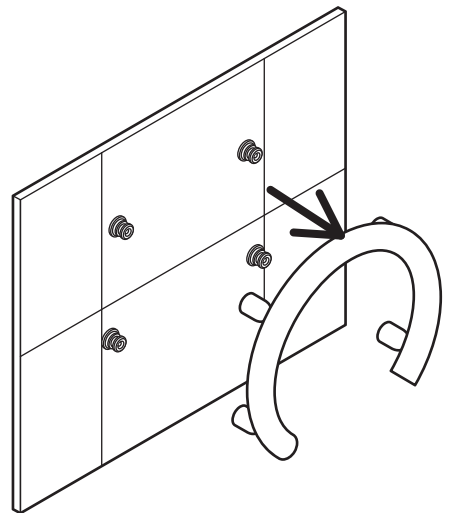


7

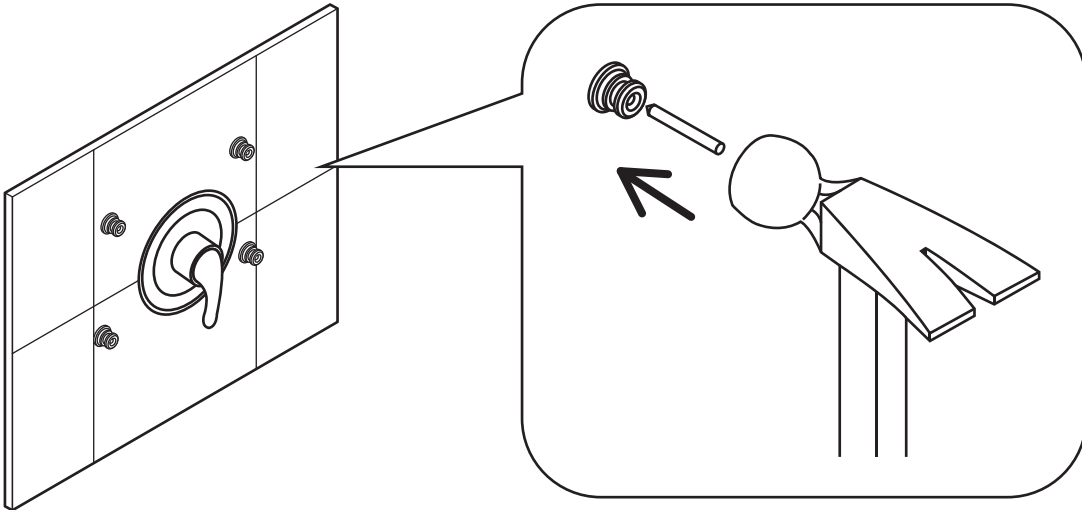


8

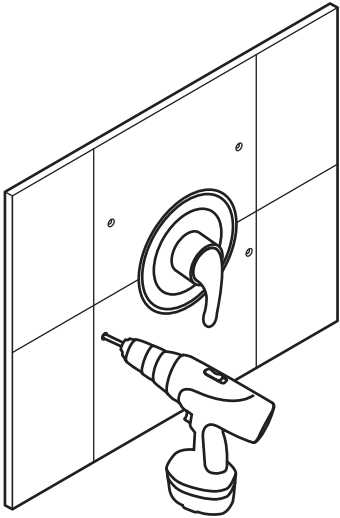


9




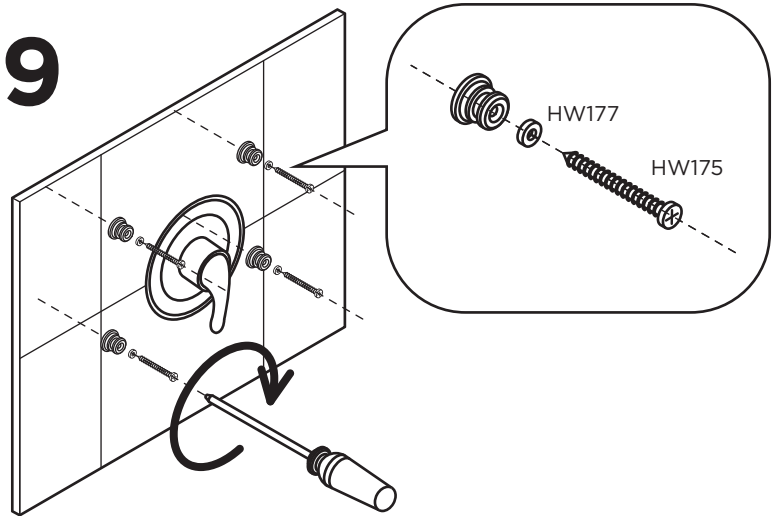


10

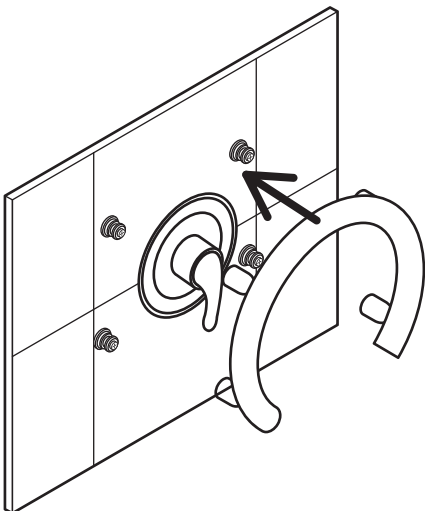

11




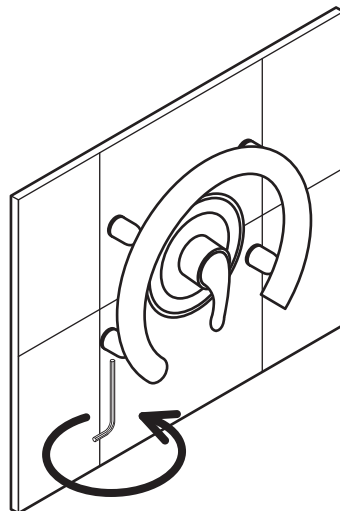


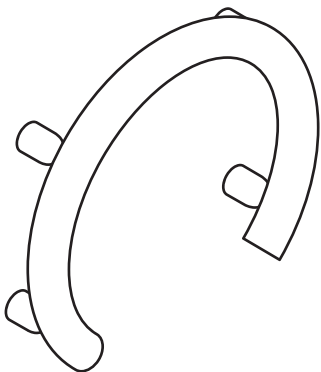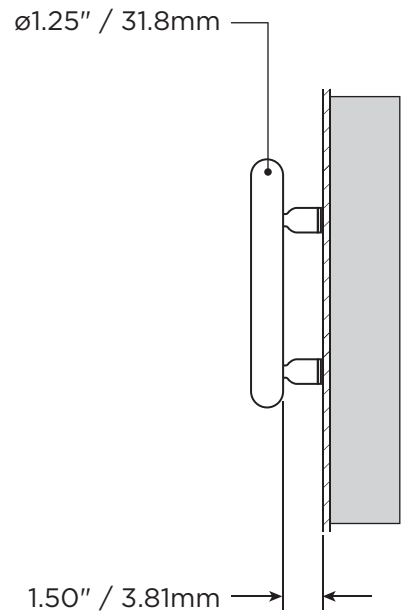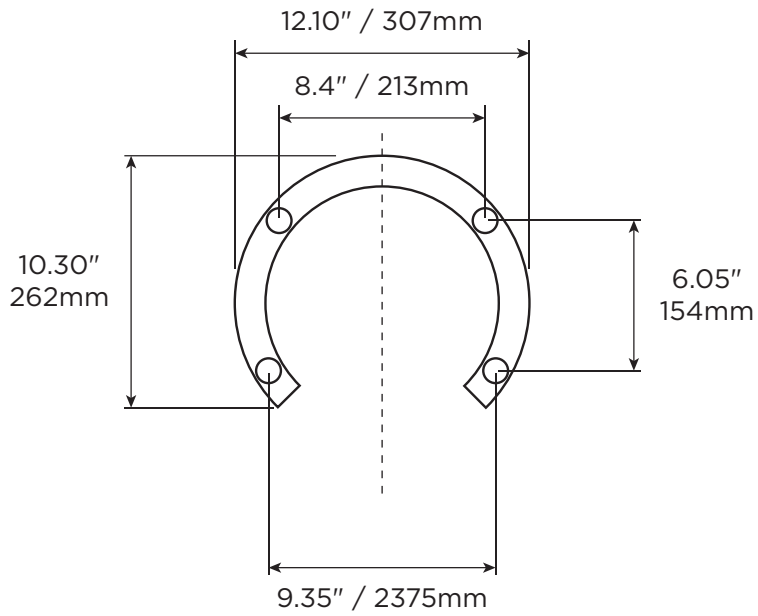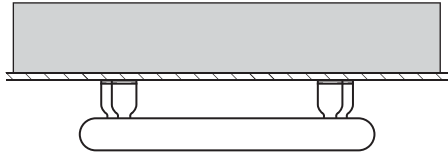

 SS
 2.05lbs
 0.93kg

 SS
 0.05lbs
 0.02kg

MAX
 500lbs
 227kg

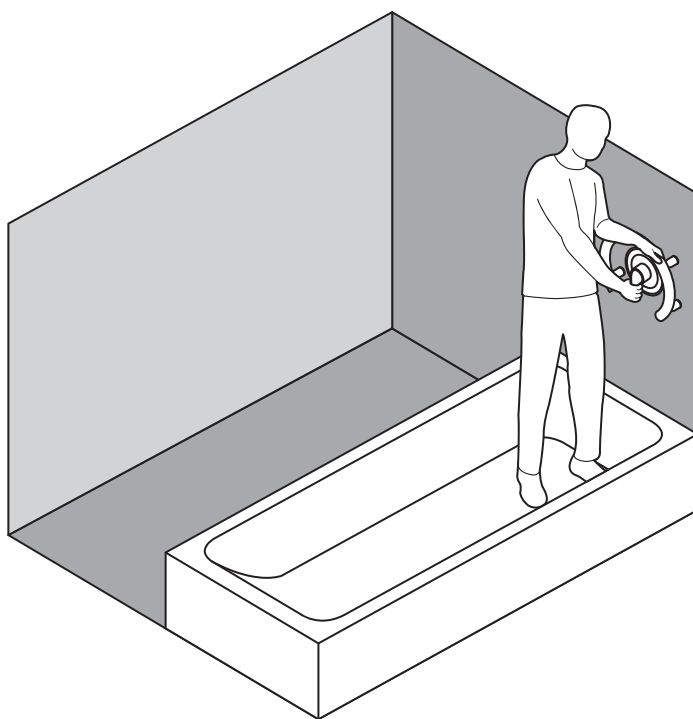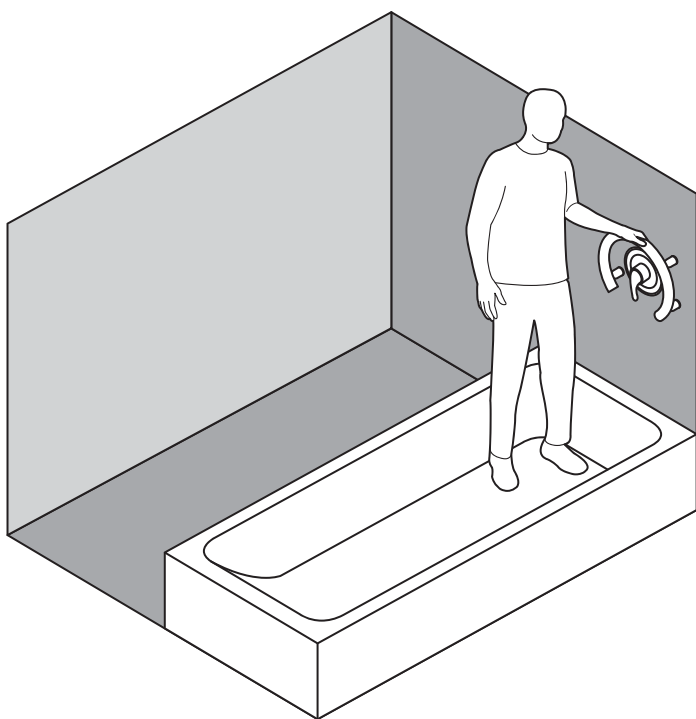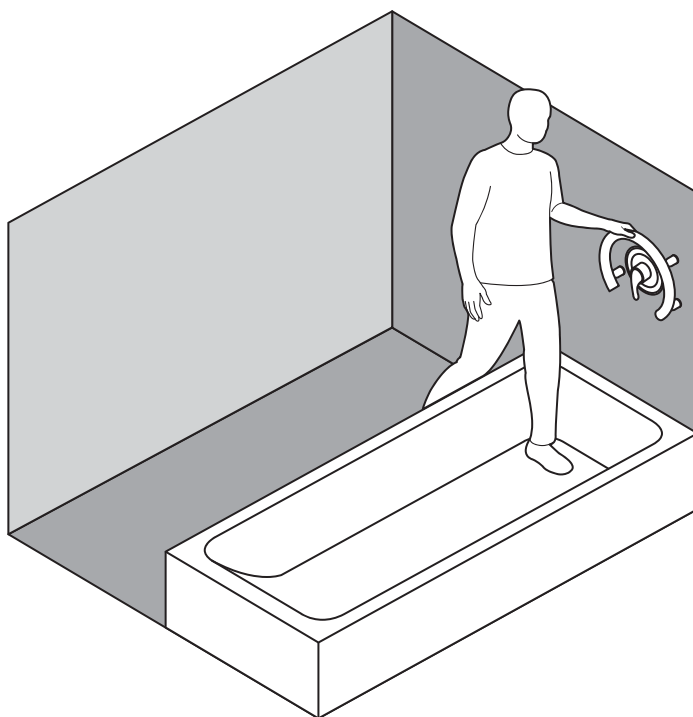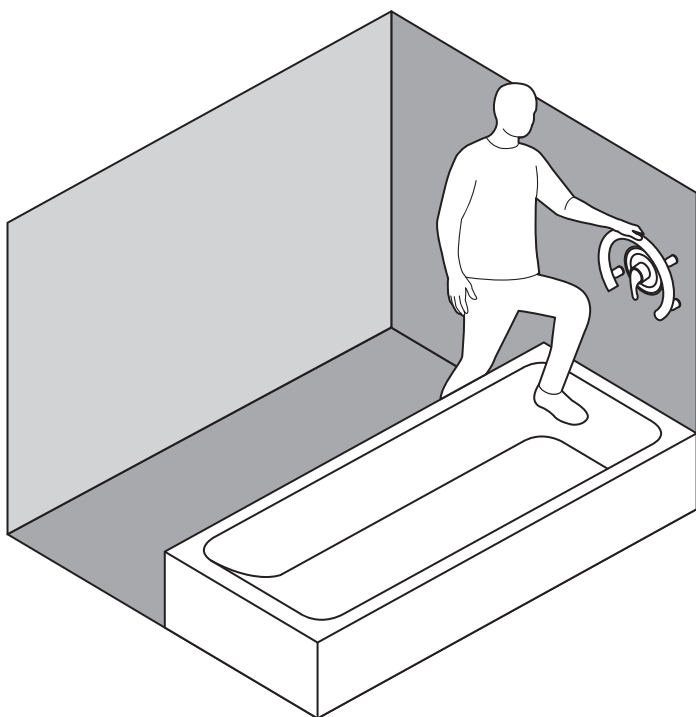

English

OVERVIEW

Thank you for choosing the Invisia Accent Ring. Please read and understand the instructions in this manual; keep manual for future reference. It is your responsibility to see that your Invisia Accent Ring is properly assembled, installed, and cared for. Failure to follow instructions in this manual could result in serious injury or death. If you are not equipped to undertake the outlined work, we would recommend that you have your Invisia Accent Ring installed by a qualified contractor.

The Invisia Accent Ring is a circular grab bar designed to disguise safety in a bathroom accessory. The Invisia Accent Ring is intended for moderate vertical and horizontal load bearing to provide sitting and standing support for people with reduced mobility. The Accent Ring is to be installed with appropriate fasteners to a structural wall. The maximum user weight for this product is 500lbs / 227kgs. Note: Product is not intended to support full body weight. The Invisia Accent Ring is not to be used in any other way than described above.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Products are covered by a limited lifetime warranty against defects in materials and workmanship for the original purchaser. Warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, wood material and stain, or the use of corrosive or abrasive cleaning products.

Buyer hereby indemnifies, agrees to hold harmless and defend HealthCraft Products Inc. from and against any and all liabilities, claims, (founded and unfounded), losses, damages, costs and expenses (including without limitation consequential damages and reasonable professional fees) resulting from buyers specification, application, or improper use of goods described hereon; buyers omission or neglect. HealthCraft Products Inc. does not assume any liability for damage resulting from services performed by others or faulty installation, misuse or misapplication of goods sold by HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. shall not be liable for prospective profits or special, indirect, or consequential damages, or for the cost of any corrective work done without HealthCraft Products Inc. prior approval. HealthCraft Products Inc. total liability hereunder shall in no event exceed the purchase price of the goods specified hereon. Specifications subject to change without notice.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



DELIVERY CONTENTS / ACCENT RING

FIGURE A.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Accent Ring | 6. Lock Washer, S/S (x4) |
| 2. Wall Stem Assembly (x4) | 7. #10 x 3" Wood Screw, S/S (x4) |
| 3. #10-32 Set Screw, S/S (x4) | 8. 3/16" Bolt, S/S (x4) |
| 4. Center Punch | 9. Hollow Wall Anchor (x4) |
| 5. 3/32" Hex Key | |

INSTALLATION WARNINGS

FIGURE B.

1. Rail must be installed to walls that are structurally sound. If desired installation location does not have adequate structure, add wood blocking.
2. For different wall constructions, use appropriate fastener combination (Note: reduced weight capacity when not full structure).
3. CAUTION - Do not install if structure behind walls is unknown.
4. CAUTION - Do not install into metal studs.
5. CAUTION - Do not install in fiberglass / acrylic shower enclosures with insufficient stiffness and strength.
6. CAUTION - Rail and bathtub are slippery when wet.

SUGGESTED ACCENT RING LOCATIONS

FIGURE C.

To determine the optimal mounting location, we recommend holding the rail in place and walking through the motions of a transfer (sitting, standing, reaching, etc.). Recommended rail height 36-48" / 914-1219mm, or centered around shower control valve.

INSTALLATION

FIGURE D.

1. Back off set screws from rail sockets.
2. Allow wall stems to freely move in and out of rail sockets.
3. Peel off label on back of wall stems to expose sticker.
4. With wall stems inside rail sockets, push the rail against the wall.
5. Firmly press the rail so stickers on back of wall stems contact wall.
6. Remove rail carefully so wall stems stay on the wall.
7. Using wall stems as locating guides, mark the tile with center punch.
8. Drill pilot holes for fasteners.
9. Fasten the wall stems to the wall using appropriate fasteners and waterproofing.
10. Place rail back onto the fastened wall stems.
11. Secure rail to wall stems by tightening set screws. Inspect hardware regularly, and tighten if required.

TECHNICAL DATA

See Figure E.

PRODUCT USAGE

See Figure F.

APERÇU

Nous vous remercions d'avoir opté pour l'Anneau d'appoint Invisia. Veuillez lire et vous familiariser avec les instructions du présent manuel; veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure. Il vous incombe de veiller à ce que l'Anneau d'appoint est correctement assemblé, installé et entretenu. Le défaut d'observer les instructions contenues dans le présent manuel pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Si vous ne disposez pas de l'équipement nécessaire pour effectuer le travail décrit, nous vous conseillons de recourir à un entrepreneur compétent pour l'installation.

L'Anneau d'appoint Invisia est une barre d'appui circulaire conçue afin d'offrir un accessoire de sécurité discret dans la salle de bain. L'Anneau d'appoint Invisia offre un support vertical et horizontal modéré permettant aux personnes à mobilité réduite de passer en position assise ou debout. L'Anneau d'appoint Invisia doit être installé à la paroi structurelle au moyen de dispositifs de fixation appropriés. Le poids maximal de l'utilisateur pour ce produit est de 227 kg/500 lb. Remarque : Le produit n'est pas destiné à soutenir entièrement le poids corporel. L'Anneau d'appoint Invisia ne doit pas être utilisé autrement qu'il est décrit ci-dessus.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Les produits sont protégés par une garantie à vie contre les défauts, pièces et main-d'œuvre, pour l'acheteur initial. La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés en raison d'un abus, d'un dommage accidentel, d'une modification, d'une usure normale, non plus qu'elle s'applique aux matériaux en bois ou aux taches, ou suite à l'utilisation de produits d'entretien abrasifs et corrosifs.

L'acheteur, par la présente, indemnise, accepte de garantir et de défendre HealthCraft Products inc. à l'égard de toutes responsabilités, réclamations (fondées et non fondées), pertes, dommages, coûts et dépenses (y compris, mais sans s'y limiter, des dommages consécutifs et des honoraires professionnels raisonnables) résultant de la spécification des acheteurs, une application ou une mauvaise utilisation des produits décrits ici; l'omission ou la négligence des acheteurs. HealthCraft Products inc. décline toute responsabilité pour les dommages résultant de services rendus par d'autres parties ou suite à une installation défectueuse, une mauvaise utilisation ou une mauvaise application des marchandises vendues par HealthCraft Products inc. HealthCraft Products inc. ne sera pas responsable pour les bénéfices potentiels ou dommages spéciaux, indirects ou consécutifs, ou pour le coût des travaux correctifs réalisés sans l'approbation préalable de HealthCraft Products inc. La responsabilité totale de HealthCraft Products inc. en vertu des présentes ne doit en aucun cas excéder le prix d'achat des marchandises, tel que précisé aux présentes. Les caractéristiques peuvent faire l'objet de changements sans préavis.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



CONTENU À LA LIVRAISON – ANNEAU D'APPOINT FIGURE A.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Anneau d'appoint | 6. Rondelle de blocage, S/S (x4) |
| 2. Tiges murales (x4) | 7. Vis à bois #10 x 3 po, S/S (x4) |
| 3. Vis de réglage #10-32, S/S (x4) | 8. Écrou 3/16 po, S/S (x4) |
| 4. Pointeau | 9. Ancrage mural pour mur creux (x4) |
| 5. Clé hexagonale 3/32 po | |

AVERTISSEMENTS LORS DE L'INSTALLATION FIGURE B.

1. L'anneau d'appoint doit être installé sur des murs dont la structure est solide. Si l'emplacement désiré n'offre pas une structure adéquate, ajoutez des blocs de bois.
2. Pour les constructions variables de murs, veuillez utiliser la combinaison appropriée de dispositifs de fixation (Remarque : la capacité de poids est réduite en cas de murs creux).
3. ATTENTION – Ne pas installer si la structure derrière le mur n'est pas connue.
4. ATTENTION – Ne pas installer dans des colombages métalliques.
5. ATTENTION – Ne pas installer sur des cabinets de douche en fibre de verre ou en acrylique n'offrant pas suffisamment de rigidité et de robustesse.
6. ATTENTION – L'anneau d'appoint et la baignoire sont glissants lorsque mouillés.

EMPLACEMENT SUGGÉRÉ POUR L'ANNEAU D'APPUI FIGURE C.

Afin de déterminer l'emplacement optimal pour l'installation, nous conseillons de maintenir l'anneau en place et d'effectuer les mouvements de transfert (positions assise et debout, atteinte, etc.). La hauteur recommandée est de 914-1219 mm/36-48 po, ou centré autour de la valve de douche.

INSTALLATION FIGURE D.

1. Retirez les vis de réglage de l'anneau.
2. Libérez les tiges des fiches de l'anneau.
3. Retirez la pellicule à l'arrière des tiges afin d'exposer la partie collante.
4. En ayant les tiges à l'intérieur des fiches, poussez l'anneau contre le mur.
5. Appuyez fermement sur l'anneau de façon à ce que la partie arrière collante soit en contact avec le mur.
6. Retirez délicatement l'anneau afin que les tiges demeurent au mur.
7. Au moyen des tiges, marquez la tuile avec le pointeau.
8. Percez les trous pilotes pour les dispositifs de fixation.
9. Fixez les tiges au mur au moyen de dispositifs de fixation appropriés, et imperméabilisez.
10. Remplacez l'anneau sur les tiges ainsi fixées.
11. Fixez l'anneau aux tiges en serrant les vis. Vérifiez régulièrement la quincaillerie, et resserrez au besoin.

DONNÉES TECHNIQUES

Voir la Figure E.

UTILISATION DU PRODUIT

Voir la Figure F.

Español

GENERAL

Gracias por elegir el anillo decorativo Invisia. Lea y asegúrese de comprender las instrucciones de este manual, y guárdelo para referencia futura. Es su responsabilidad verificar que su anillo decorativo Invisia sea ensamblado, instalado y cuidado correctamente. Si no se siguen las instrucciones de este manual, podrían producirse como resultado lesiones graves o aun la muerte. Si usted no tiene los medios para realizar el trabajo que se describe, recomendamos que haga instalar el anillo decorativo Invisia por un contratista calificado.

El anillo decorativo Invisia es una barra circular de sujeción que ha sido concebida para disimular elementos de seguridad en un accesorio para el baño. El anillo decorativo Invisia ha sido concebido para soportar una carga vertical y horizontal moderada, con el objetivo de ofrecer apoyo a las personas con movilidad reducida cuando se sientan o se ponen de pie. El anillo decorativo se instala con sujetadores apropiados que lo fijan a una pared estructural. El peso máximo del usuario de este producto es de 500 lb/227 kg. Nota: El producto no está destinado a soportar el peso total del cuerpo. El anillo decorativo Invisia no debe usarse de ninguna otra forma fuera de lo antes descrito.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos están cubiertos por una garantía limitada de por vida por defectos en los materiales y la mano de obra, en beneficio del comprador original. La garantía excluye productos que hayan sido dañados por uso incorrecto, daño accidental, alteración, desgaste normal, materiales de madera y teñido, o el uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Por el presente, el comprador mantiene indemne y se manifiesta de acuerdo en liberar y defender a HealthCraft Products Inc. de toda responsabilidad, reclamo (fundado o infundado), pérdida, daño, costo y gasto (incluidos, sin que esto excluya otras posibilidades, los daños derivados y las costas profesionales razonables) que resulte de la especificación, la aplicación o el uso inapropiados de los productos que aquí se describen, como también de toda omisión o negligencia por parte del comprador. HealthCraft Products Inc. no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de los servicios prestados por otros, como tampoco de la instalación defectuosa, del uso incorrecto o de la aplicación incorrecta de los bienes vendidos por HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. no será responsable por los beneficios potenciales o los daños especiales, indirectos o derivados, ni por el costo de ninguna tarea correctiva realizada sin la previa aprobación de HealthCraft Products Inc. La responsabilidad total de HealthCraft Products Inc. en virtud del presente no será superior en ningún caso al precio de compra de los productos aquí especificados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



CONTENIDO ENTREGADO/ ANILLO DECORATIVO

FIGURA A.

- | | |
|---|--|
| 1. Anillo decorativo | 6. Arandela de seguridad, A/I (x4) |
| 2. Conjunto del vástago de pared (x4) | 7. Tornillo para madera #10 x 3", A/I (x4) |
| 3. Tornillo de presión #10-32, A/I (x4) | 8. Perno de 3/16", A/I (x4) |
| 4. Punzón | 9. Anclaje para pared hueca (x4) |
| 5. Llave hexagonal de 3/32" | |

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

FIGURA B.

1. El anillo decorativo se debe instalar sobre paredes de estructura sólida. Si el lugar donde se desea hacer la instalación no tiene una estructura adecuada, agregue suplementos de madera.
2. Para paredes de distinta construcción, use una combinación apropiada de sujetadores (Nota: cuando la estructura no es completa se reduce la capacidad de soportar peso).
3. PRECAUCIÓN – No instalar si se desconoce la estructura que está detrás de la pared.
4. PRECAUCIÓN – No instalar sobre montantes de metal.
5. PRECAUCIÓN – No instalar en cerramientos para ducha de fibra de vidrio o acrílico sin la suficiente rigidez y resistencia.
6. PRECAUCIÓN – El anillo decorativo y la tina son resbaladizos cuando están húmedos.

UBICACIONES SUGERIDAS PARA EL ANILLO DECORATIVO FIGURAC.

A fin de determinar la ubicación óptima para montarlo, recomendamos sostener el anillo en el lugar y simular los movimientos de traslado (sentarse, ponerse de pie, estirarse, etc.). Altura recomendada del anillo decorativo: 36-48" / 914-1219mm, o centrado alrededor de la válvula de control de la ducha.

INSTALACIÓN

FIGURA D.

1. Retirar los tornillos de presión de los encastres del anillo.
2. Permitir que los vástagos de pared entren y salgan libremente de los encastres del anillo.
3. Retirar la etiqueta de la parte posterior de los vástagos para dejar expuesto el adhesivo.
4. Con los vástagos dentro de los encastres del anillo, empujar el anillo contra la pared.
5. Presionar firmemente el anillo para que los adhesivos que están en la parte trasera de los vástagos hagan contacto con la pared.
6. Retirar el anillo con cuidado para que los vástagos queden sobre la pared.
7. Usando los vástagos como guías de ubicación, marcar el azulejo con un punzón.
8. Perforar orificios guía para los sujetadores.
9. Fijar los vástagos a la pared usando sujetadores apropiados e impermeabilizante.
10. Volver a colocar el anillo sobre los vástagos asegurados.
11. Fijar el anillo a los vástagos ajustando los tornillos de presión. Inspeccionar regularmente los accesorios de ferretería, y ajustar si es necesario.

DATOS TÉCNICOS

Consulte la Figura E.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

Consulte la Figura F.

ÖVERSIKT

Tack för att du väljer Invisia accentring. Läs igenom och se till att du förstår anvisningarna i den här handboken. Spara handboken för framtida bruk. Du ansvarar själv för att se till att din Invisia accentring monteras, installeras och underhålls ordentligt. Underlåtelse att följa anvisningarna i den här handboken kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Om du inte klarar av att utföra det arbete som beskrivs, rekommenderar vi att du låter en behörig hantverkare installera Invisia accentring.

Invisia accentring är en rund gripstång där snygg design och trygghet kombineras i ett badrumstillbehör. Invisia accentring är avsedd för måttlig belastning vertikalt och horisontellt för att tillhandahålla stöd vid sittande och stående ställning för personer med nedsatt rörlighet. Accentringen ska installeras med lämpliga fästen på en bärande vägg. Maxvikten för en användare av den här produkten är 227 kg. Obs! Produkten är inte avsedd att stödja full kroppsvikt. Invisia accentring ska inte användas på något annat sätt än enligt beskrivningen ovan.

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI

Den ursprungliga köparen får en begränsad livstidsgaranti som täcker fel i material och tillverkningen av produkterna. Garantin gäller inte produkter som har skadats till följd av felaktig användning, genom olyckshändelse, modifiering, normalt slitage, kontakt med eller missfärgning från trämaterial, eller användningen av frätande eller slipande rengöringsmedel.

Köparen samtycker härmed till att gottgöra, försvara och hålla HealthCraft Products Inc. skadelösa från alla betalningsskyldigheter, anspråk (med eller utan grund), förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, följdskador och rimliga arvoden) som uppstår till följd av köparens specifikation, tillämpning eller felaktiga användning av varor som beskrivs här, samt köparens försummelse eller vårdslöshet. HealthCraft Products Inc. bär inget ansvar för skador som uppstår till följd av tjänster som utförs av tredje part eller felaktig installation, felaktig användning eller tillämpning av varor som säljs av HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. bär inget ansvar för eventuella vinster eller särskilda eller indirekta skador eller följdskador, eller för kostnaden av korrigerande arbeten som utförs utan godkännande från HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. totala betalningsskyldighet ska inte under några omständigheter överstiga inköpspriset för varorna som anges här. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



Distribueras av Now Boarding AB i Sverige.

LEVERANSINNEHÅLL/ACCENTRING

FIGUR A.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Accentring | 6. Fjäderbricka, S/S (× 4) |
| 2. Självhäftande väggförankring (× 4) | 7. #10 × 3" träskruv, S/S (× 4) |
| 3. #10-32 ställskruv, S/S (× 4) | 8. 3/16" skruv, S/S (× 4) |
| 4. Körnare | 9. Ihåligt väggankare (× 4) |
| 5. 3/32" insexnyckel | |

INSTALLATIONSVARNINGAR

FIGUR B.

- Accentringen ska installeras på väggar som är konstruktionsmässigt lämpliga. Om konstruktionen på önskad installationsplats inte är godtagbar kan du använda kortlingar.
- Använd en lämplig kombination av fästelement beroende på väggkonstruktion. (Obs! Icke-bärande konstruktioner ger reducerad vikt kapacitet.)
- VARNING** – Installera inte ringen om du inte känner till hur konstruktionen bakom väggarna ser ut.
- VARNING** – Sätt inte fast ringen i metallreglar.
- VARNING** – Installera inte ringen i duschkabiner i glasfiber/akryl som inte är tillräckligt styva eller starka.
- VARNING** – Accentringen och badkaret är hala när de är våta.

FÖRESLAGNA INSTALLATIONSPLATSER FÖR ACCENTRINGEN FIGUR C.

För att fastställa den bästa möjliga installationsplatsen rekommenderar vi att du håller accentringen på plats och går igenom de olika rörelserna (t.ex. när man sätter sig, ställer sig upp, sträcker sig efter något osv.). Rekommenderad höjd för accentringen är 91–122 cm, eller så kan den placeras runt duschens blandare.

INSTALLATION

FIGUR D.

- Lossa ställskruvarna från accentringens hållare.
- Se till att väggförankringarna kan röra sig fritt in och ut accentringens hållare.
- Ta bort skyddsfilmerna på väggförankringarnas baksida för att exponera den självhäftande tejen.
- Låt väggförankringarna sitta i stödstångens hållare och tryck accentringen mot väggen.
- Tryck hårt på accentringen så att den självhäftande tejen på väggförankringarnas baksida kommer i kontakt med väggen.
- Ta försiktigt bort accentringen så att väggförankringarna sitter kvar på väggen.
- Använd väggförankringarna som vägledning och märk kaklet med körnaren.
- Förborra hål för fästelementen.
- Sätt fast väggförankringarna ordentligt i väggen med hjälp av lämpliga fästelement och vattentätning.
- Sätt tillbaka accentringen på de ditsatta väggförankringarna.
- Sätt fast accentringen ordentligt i väggförankringarna genom att dra åt ställskruvarna. Kontrollera fästelement och beslag regelbundet. Dra åt dem vid behov.

TEKNISKA UPPGIFTER

Se figur E.

PRODUKTANVÄNDNING

Se figur F.

OVERBLIK

Tillykke med købet af Invisia griberingen. Læs og forstå anvisningerne i denne vejledning, og opbevar den som reference. Det er ejerens ansvar, at Invisia griberingen samles, monteres og vedligeholdes korrekt. Hvis anvisningerne i denne vejledning ikke overholdes, er der risiko for alvorlig personskade eller livsfare. Hvis du ikke selv kan udføre arbejdet som beskrevet i denne vejledning, anbefaler vi at få en kvalificeret montør til at montere Invisia griberingen.

Invisia griberingen er en rund holdering, der diskret skjuler, at det er støtteudstyr til badeværelset. Invisia griberingen er beregnet til moderate lodrette og vandrette vægtbelastninger til at støtte bevægelseshæmmede i siddende og stående stilling. Griberingen monteres med de tilhørende befæstelsesdele på en bærende væg. Den maksimale brugervægt for dette produkt er 227 kg. Bemærk: Dette produkt er ikke beregnet til at bære hele kroppens vægt. Invisia griberingen må ikke anvendes på anden vis end som beskrevet ovenfor.

LEVETIDSGARANTI

Produkterne er omfattet af levetidsgaranti mod materiale- eller fabriksfejl og dækker den oprindelige køber. Garantien dækker ikke produkter, der er beskadiget på grund af forkert brug, hændelig skade, ændringer, normal slitage, træmateriale og overfladebelægning eller brug af ætsende eller slibende rengøringsmidler.

Køberen indvilliger i at holde HealthCraft Products Inc. skadesløs samt godtgøre og forsvare firmaet i tilfælde af erstatningsansvar, erstatningskrav (både begrundede og ubegrundede), tab, skader, omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, følgeskader og rimelige honorarer) som følge af køberens specifikation, anvendelsesformål eller forkert anvendelse af produkterne, som beskrevet her, samt køberens forsømmelse eller uagtsomhed. HealthCraft Products Inc. påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes service udført af andre, eller forkert montering, anvendelse eller tilpasning af produkter, som er solgt af HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. påtager sig intet ansvar for tab af mulig indtjening eller dokumenterede, indirekte eller afledte erstatningskrav eller for omkostninger til eventuelt korrigerende arbejde, som udføres uden forudgående godkendelse fra HealthCraft Products Inc. Det samlede erstatningsansvar for HealthCraft Products Inc. kan under ingen omstændigheder overstige købsprisen for produkterne, som er angivet her.

Specifikationerne er med forbehold for ændring uden varsel.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



INDHOLD I PAKKEN MED GRIBERING

FIG. A.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Designer-gribering | 6. Låseskive, S/S (4 stk.) |
| 2. Vægholder (4 stk.) | 7. #10 x 3" træskruer, S/S (4 stk.) |
| 3. #10-32 stopskruer, S/S (4 stk.) | 8. 3/16" bolt, S/S (4 stk.) |
| 4. Kørner | 9. Hult muranker (4 stk.) |
| 5. 3/32" unbrakonøgle | |

MONTERINGSADVARSLER

FIG. B.

1. Designer-griberingen skal monteres på en solidt bærende væg. Hvis konstruktionen på det ønskede monteringssted ikke er tilstrækkelig, kan der monteres træklodser.
2. Til forskellige vægkonstruktioner skal der anvendes den korrekte kombination af befæstelsesdele (bemærk: belastningskapaciteten reduceres på ikke fuldt bærende væg).
3. OBS – Må ikke monteres uden kendskab til konstruktionen i væggen.
4. OBS – Må ikke monteres på metalprofiler.
5. OBS – Må ikke monteres på brusekabiner af glasfiber/akrylglas, da de ikke har tilstrækkelig stivhed og styrke.
6. OBS – Gribering og badekar er glatte, når de er våde.

FORSLAG TIL PLACERING AF GRIBERING

FIG. C.

For at finde det optimale monteringssted anbefaler vi at holde griberingen op på stedet og prøve med de forskellige forflytningsbevægelser (til siddende, stående stilling, udrækning osv.). Anbefalet højdeplacering af griberingen: 91-122 cm eller centreret omkring bruserhanen.

MONTERING

FIG. D.

1. Løsn stopskruerne fra mufferne.
2. Før vægholderne løst i og ud af mufferne.
3. Tag mærkatene af klæbefladen bag på vægholderne.
4. Tryk griberingen mod væggen med vægholderne inde i mufferne.
5. Pres griberingen ind med et fast tryk, så klæbefladerne bag på vægholderne er i kontakt med væggen.
6. Afmonter griberingen forsigtigt, så vægholderne bliver siddende på væggen.
7. Brug vægholderne som placeringsmærker, og opmærk på flisen med en kørner.
8. Forbor huller til befæstelsesdelene.
9. Monter vægholderne på væggen med de tilhørende befæstelsesdele og vandtætning.
10. Sæt griberingen på de monterede vægholdere.
11. Fastgør griberingen på vægholderne ved at spænde stopskruerne. Kontroller monteringsdelene regelmæssigt, og spænd efter som nødvendigt.

TEKNISKE DATA

Se fig. E.

PRODUKTANVENDELSE

Se fig. F.